

Gördíthető szoba WC lehajtható kartámasszal levehető lábtartóval
0810120
Használati utasítás



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérült vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és asszisztens segítségével WC-re és személyi higiéniaira is használható. Ezek a kerekesszékek WC-ülőként is használhatók.

MŰSZAKI ADATOK Lásd az A. MELLÉKLETET

MÉRETEK Lásd a B. MELLÉKLETET

ÖSSZESZERELÉS Lásd a C. MELLÉKLETET

SZIMBÓLUMOK Lásd a D. MELLÉKLETET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékebe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- A 0810120, 0811605 számú Commode kerekesszékeket csak beltérben szabad használni.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIÁK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékházakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumiabroncs és a kerékház között.

FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Kapaszkodjon az asszisztensébe, és lassan üljön a helyére.

KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Kérjen támogatást asszisztensétől.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
2. Ezt a kerekesszéket kizárólag személy szállítására lehet használni az ülésen.
3. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
4. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
5. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
6. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

HETI

1. Ellenőrizze a komód állapotát, hogy nincs-e rajta törés, repedés vagy szivárgás.
2. Ellenőrizze az acélkeret csavarjait. Ha meglazult, húzza meg. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerezrel.
3. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz kendővel vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.
4. Ellenőrizze a kerékfékeket, és ellenőrizze működésüket.
5. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

NEGYEDÉVENKÉNT

1. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
2. Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
3. Ellenőrizze a WC stabilitását (kerekek nélkül) vagy egyensúlyát (kerekekkel).
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződéseket szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrülékes kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIÁK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIÁK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak nyilatkoztatásáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek.












Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

A. MELLÉKLET ELŐÍRÁSOK

	081020	0811605
VÁZ	ALUMÍNIUM	ALUMÍNIUM
VÁZ	NEM ÖSSZECSUKHATÓ	NEM ÖSSZECSUKHATÓ
SZÍN	EZÜST	KÉK
ÜLÉS	PVC BŐR KEREK KOMODÁVAL	PVC BŐR KEREK KOMODÁVAL
KARFÁK	ÖSSZEHAJTHATÓ	ÖSSZEHAJTHATÓ
LÁBTÁMAK	LESZERELHETŐ ÉS ÁLLÍTHATÓ HOSSZSÁG	LESZERELHETŐ ÉS ÁLLÍTHATÓ HOSSZSÁG
HÁTSÓ KEREKEK	5"x 1" (127x25mm) SZILÁRD FÉKHEZ	5"x 1" (127x25mm) SZILÁRD FÉKHEZ
ELSŐ KEREKEK	5"x 1" (127x25mm) SZILÁRD	5"x 1" (127x25mm) SZILÁRD
KÉZI FÉK	NEM	NEM
MAX. TERHELHETŐSÉGE	110 KG	110 KG

B. MELLÉKLET MÉRETEK




											
0810120	45 cm	44 cm	43 cm	40 cm	54 cm	91 cm	99 cm	54 cm	5" 5"	110 Kg	16 Kg
0811605	45 cm	44 cm	44 cm	38 cm	54 cm	91 cm	95 cm	52 cm	5" 5"	110 Kg	14 Kg

C. MELLÉKLET ÖSSZESZERELÉS


A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló. A kerekesszék összeszerelését a háttámlát.

- A csomagolás tartalma :
Lásd 1. kép
- Helyezze az üléskapcsokat a keret speciális réseibe.
Lásd 2. és 3.kép



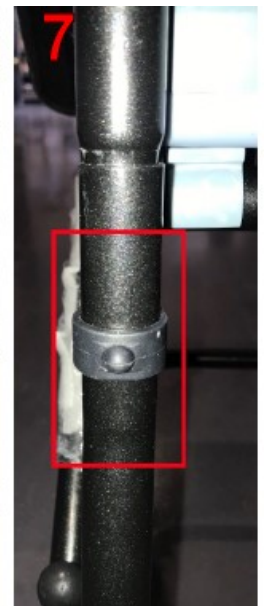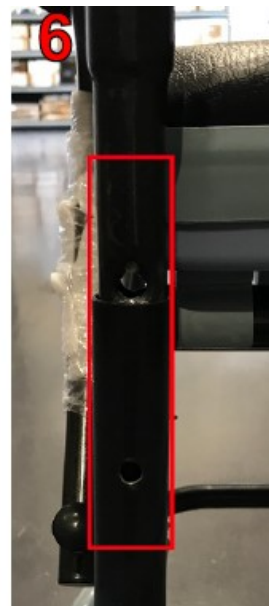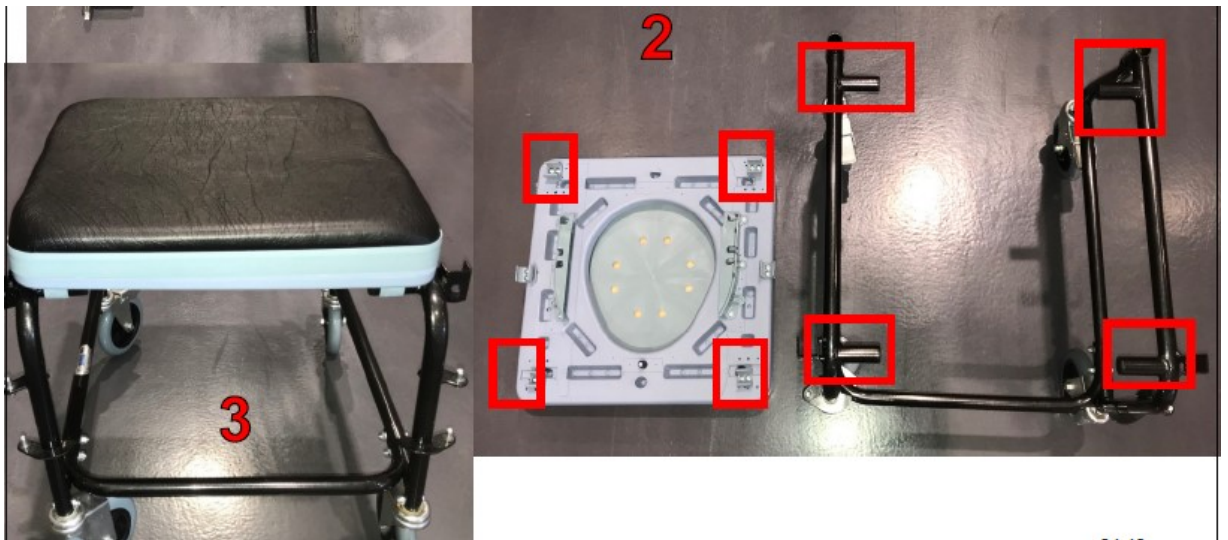


- Távolítsa el a „C” kapcsokat, helyezze be a hátoldalt a megfelelő nyílásokba, és rögzítse ugyanazokkal a „C” kapcsokkal. Lásd a 4., 5., 6. és 7. képet.
- Rögzítse a karfákat a megfelelő zárakba. Lásd a 8-as és 9-es képeket.
- A lehajtható kartámasz felemeléséhez húzza ki a kart, vagy nyomja meg a biztonsági gombot, és húzza felfelé vagy lefelé.

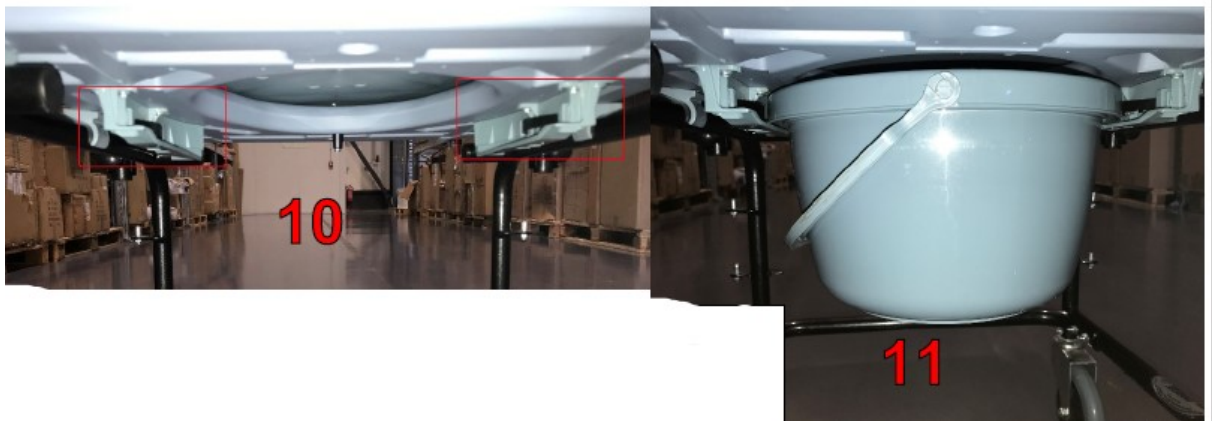

- Helyezze a műanyag komódot a megfelelő zárakba. Lásd a 10-es és 11-es képeket.
- Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattann. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik lábtámasznál.
Távolítsa el a lábtámaszt a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklócsapszegekről.



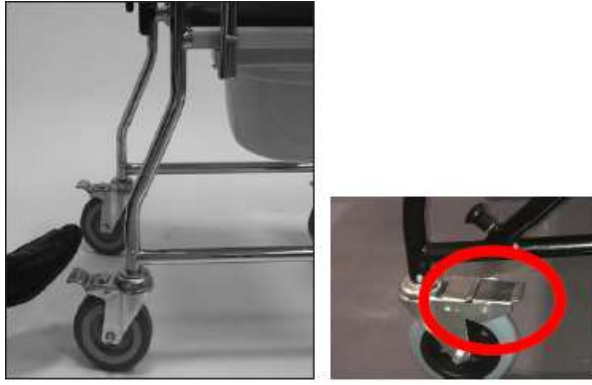

- A két hátsó kormánykeréken fékek vannak. Fékek beállítása: nyomja le a fékkart a lábával. Fékek kioldása: húzza felfelé a kart a lábujjával.

D. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi eszközzazonosító



Napfénytől távol tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri használat



Berendezési irányelv



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com